DESIGNED, TESTED AND
APPROVED **IN GERMANY**

Fakir
HAUSGERÄTE

HERCULES

Cam Vücut Analiz Baskülü

Glass Body Analysis Scale



TR Kullanım Kılavuzu
EN User Manual

TR Garanti Belgesi
EN Warranty Certificate

Türkçe..... 3
English..... 19

Türkçe

Kullanım Talimatları Hakkında 4
Sembollerin Anlamı 4
Sorumluluk 4
CE Uygunluk Deklarasyonu 4
Kullanım Alanı 4
Yetkisiz Kullanım 5
Güvenlik Uyarıları 5
Ürüne Özel Güvenlik Uyarıları 6
Kutuyu Açma 8
Özellikler ve Teknik Spesifikasyonlar 8
Performans İndeksi 8
Pili Takma ve Çıkarma 8
Anahtar Açıklamalar 9
LCD Ekran 9
Ağırlık Birimini Ayarlama 10
Sadece Ağırlık Ölçümü 10
Yağ, Su, Kas, Kemik, Kalori Ölçüm Modu 11
Parametrelerin Girişi 12
Uyarı Göstergeleri 14
Vücut Yağ Oranı 15
Kalori Hakkında 16
Kullanım ve Bakım Önerileri 16
Cihazın Saklanması 16
Geri Dönüşüm 16
Sorun Giderme 17
Gönderim 17

Değerli Müşterimiz,

Ürününüzü keyifle kullanmanızı dileriz. Yenilikçi teknolojilerde lider bir firma olan **Fakir Hausgeräte**'yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Kullanım Talimatları Hakkında

Bu kullanım talimatları, cihazın düzgün ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için hazırlanmıştır. Kendi güvenliğiniz ve başkalarının güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz.

Sembollerin Anlamı

Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki sembolleri göreceksiniz:

UYARI!

Bu işaret, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek tehlikeleri belirtir.

DİKKAT!

Bu işaret, ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmasına yol açabilecek tehlikeleri belirtir.

NOT!

Kullanım kılavuzunda önemli ve faydalı bilgileri belirtir.

Sorumluluk

Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve cihazın Fakir Yetkili Servisleri dışında farklı bir yerde tamir ettirilmesi veya cihazın amacına uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, Fakir Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. sorumluluk kabul etmez.

CE Uygunluk Deklarasyonu

Bu cihaz, Avrupa Birliği'nin 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi ve 2014/35/EU Alçak Gerilim Direktifi'ne tamamen uygundur. Ürün, cihaz tip etiketinde CE işaretine sahiptir.

Kullanım Alanı

Ürün modeli, ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. İş yeri ve sanayi tipi kullanıma uygun değildir. Aksi kullanım sonucu üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda, yetkili servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.

Yetkisiz Kullanım

- **Kısıtlı Kapasiteler ve Gözetim:** Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından kullanımı hakkında açıklamalar yapılmadığı veya gözetim altında olmadıkları sürece, fiziksel, algısal veya zihinsel kapasiteleri kısıtlı olan veya yeterli tecrübe ve/veya bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır. Çocukların cihazla oynamaması için gözetim altında tutulması gerekmektedir.
- **Kısıtlı Yetkinliklerle Kullanım:** Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile sınırlı fiziksel, duyusal ve zihinsel becerilere sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından yalnızca gözetim altında oldukları, cihazın güvenli bir şekilde kullanımına dair talimat verildiği ve muhtemel tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir.
- **Ambalaj Malzemeleri:** Paketin içinden çıkan poşet gibi maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. Boğulma tehlikesi mevcuttur!
- **Temizlik ve Bakım:** 8 yaşından küçük çocuklar, gözetim altında olmadıkları sürece cihazın temizliğini ve bakımını yapmamalıdır.
- **Cihaz ve Kablo Güvenliği:** Cihazı ve kablosunu, 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Çocukların cihazla oynamaması için gözetim altında tutulmaları gerekmektedir. Elektrikli cihazlar çocuklar için oyuncak olarak kullanılmamalıdır. Bu nedenle, cihazı çocukların ulaşamayacağı yerlerde kullanınız ve saklayınız. Çocuklar, elektrikli bir cihazın kullanımıyla ilgili tehlikelerin bilincinde olamayabilirler. Elektrik kablosunun cihazdan sarkmasına izin vermeyiniz.

Güvenlik Uyarıları

Elektrikli bir cihaz kullanırken, aşağıdaki önlemleri her zaman almanız gerekmektedir. Yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanmaları önlemek için:

- **Kullanım Kılavuzunu Okuyun:** Kullanım kılavuzundaki bilgileri dikkatlice okuyunuz ve kılavuzu saklayınız. Cihazı üçüncü bir kişiye verirken, kılavuzu da birlikte vermeyi unutmayınız.
- **İlk Kullanım:** Ürünü kolisinden çıkardığınızda, aksesuarların ve aparatların tam olduğundan emin olunuz. Kutuda eksik parça var ise, en yakın Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz. Aksesuarların ve aparatların koruma poşetlerini

boğulma riskini engellemek için çocuklardan ve bebeklerden uzak tutunuz.

- **Cihazın Durumunu Kontrol Edin:** Cihazın üzerinde, kasasında, kablosunda veya fişinde herhangi bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, cihazı çalıştırmayınız ve en yakın Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- **Kablo ve Fiş Güvenliği:** Elektrik kablosu veya fişinde bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız. Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayınız ve elektrik kablosunun ısı kaynağı ya da sivri uçlarla temas etmemesine özen gösteriniz. Fişi prizden çekmek istediğinizde, mutlaka fişten tutarak çekiniz. Kabloyu çekmeyiniz veya cihazı kablodan tutarak kaldırmayınız.
- **Çocukların Güvenliği:** Makinenizi asla fişe takılı iken gözetiminiz dışında bırakmayınız. Gözetiminiz dışında çocukların cihazla oynamasına izin vermeyiniz. Cihazın elektrik kablosunu çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Elektrikli cihazlar çocuklar için oyuncak değildir.
- **Cihazın Kullanımı:** Cihazı açık havada kullanmayınız. Makineniz kir veya yağmurdan olumsuz etkilenebilir. Makinenizi suya daldırmayınız ve yağmur ya da rutubetten koruyunuz. Cihaz elektrik gücüyle çalıştığından elektrik çarpma tehlikesi vardır. Bu nedenle fişe kesinlikle ıslak ellerle dokunmayınız. Cihazı yanıcı veya patlayıcı maddeler (örneğin benzin veya alkol), yanan veya tüten nesneler (örneğin sigaralar, kibritler veya sıcak kül) ile temizlemek için kullanmayınız.
- **Bakım ve Temizlik:** Temizlik ve bakım işlemleri öncesinde cihazın fişini prizden çekiniz ve cihazın soğumasını bekleyiniz.
- **Kullanım Kısıtlamaları:** Elektrikli cihazı yalnızca kullanım amacı doğrultusunda kullanınız. Cihazı talimatlara aykırı şekilde kullanmak, cihazın ömrünü kısaltabilir ve güvenlik riskleri oluşturabilir.

Ürüne Özel Güvenlik Uyarıları

Kullanıcı Dostu Öneriler

1. Ölçüm Sırasında

A. Cihaz üzerine bastığınızda otomatik olarak açılacak şekilde dizayn edildi. Lütfen efektif ölçümlerin ilk ölçümden sonra olacağını unutmayınız.

B. Cihazı kullanmadan önce ayakkabı ve çoraplarınız çıkararak, ayaklarınızı temizleyiniz.

C. Ölçüm bölgesine yavaşça basınız.

D. Günlük ölçümlerinizi günün aynı saatlerinde yapınız.

E. Ölçümleri egzersiz sonrası, aşırı diyet sonrası ve susuz durumlarda yaparsanız, hatalı sonuçlar alabilirsiniz.

F. Ölçüm yaparken cihazı sert ve düz bir zemin üzerine koyunuz ve ölçüm esnasında sabit tutunuz.

G. Aşağıdaki kişilerin ölçümlerinde sapmalar olabilir;

- 10 yaşın altındaki çocuklarda ve 100 yaşın üzerindeki yetişkinlerde. (sadece kilo ölçümü yapılabilir)
- 70 yaşın üzerindeki yetişkinlerde,
- Vücut geliştirme sporcularında veya mesleği spor olan kişilerde.

H. Aşağıdaki kişiler cihazı kullanmamalıdır;

- Hamile kadınlar
- Ödemi olan kişiler,
- Diyaliz tedavisi gören kişiler,
- Kalp atışını ayarlayan cihaz kullanan kişiler veya herhangi bir tıbbi cihaz takılı olan kişiler.

2. Güvenlik Uyarıları

A. Yağ ve Su oranı ölçümleri sadece referans olabilir, tıbbi amaçlar için kullanılamaz. Eğer yağ ve su oranlarınız normal seviyenin altında veya üstünde ise daha fazla bilgi almak için lütfen doktora başvurunuz.

B. Cihazı kullanırken elektro manyetik alanlardan uzak durunuz.

C. Ölçümünüzü ıslak bir zeminde yapıyorsanız, kaygan olabilir. Eğer cihazın platformu kaygan ise cihazı kullanmayınız.

Kullanım kılavuzunda yazılı olan güvenlik kurallarını ve kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz.

Bu kullanım kılavuzunu gelecekteki kullanımlar için saklayınız.

Kutuyu Açma

- İlk kullanımdan önce cihazı ve aksesuarları kutusundan çıkarınız ve hasar veya arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza veya hasar varsa, cihazı kullanmayınız ve Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- Tamir işlemleri kesinlikle Fakir Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir işlemleri kullanıcı için zararlı olabilir.

UYARI!

Kesinlikle hatalı veya kusurlu bir ürünü kullanmayınız.

Özellikler ve Teknik Spesifikasyonlar

1. Hassas, gerili tartı sensörü kullanır.
2. Vücut yağ oranını, vücut su oranını, vücut kas oranını ve vücut kemik oranını ve günlük kalori gereksinimini ölçer.
3. 12 farklı kullanıcının ayarlarını kaydeder.
4. Sadece kilo ölçme özelliği, basarak açılma özelliği ve ölçüm yaparken ağırlık eklenebilirlik.
5. Pil az ve aşırı yükleme uyarıları.

NOT!


Ürünün üzerinde bulunan işaretlemeler veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

Performans İndeksi

İndeks / Ölçüm	Kilo	Yağ%	Su%	Kas%	Kemik%	Kalori
İndeks Aralığı		4.0% ~60.0%	27.5% ~66.0%	20.0% ~56.0%	2.0% ~20.0%	
Sapma	0.1kg 0.2lb	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	1KCAL

Pili Takma ve Çıkarma

- Kullanmadan önce pil bölmesindeki izolasyon kağıdını çıkartınız.
- Cihazın arkasında bulunan pil bölmesi kapağını açınız.
- Sivri bir nesnenin yardımıyla bitmiş olan pili resmin yardımıyla çıkartınız.
- Yeni pili; pilin üst tarafı aşağı gelecek şekilde yerleştiriniz ve pilin arkasına bastırınız.

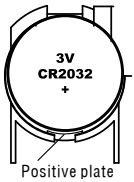


Anahtar Açıklamalar

SET (ON/SET) : Cihazı açar ve diğer parametreye geçiş yapar

▲ : Ekrandaki değeri her basışta bir değer yukarı ayarlar. Sürekli basılırsa değişim hızı artar.

▼ : Ekrandaki değeri her basışta bir değer aşağı ayarlar. Sürekli basılırsa değişim hızı artar.

LCD Ekran

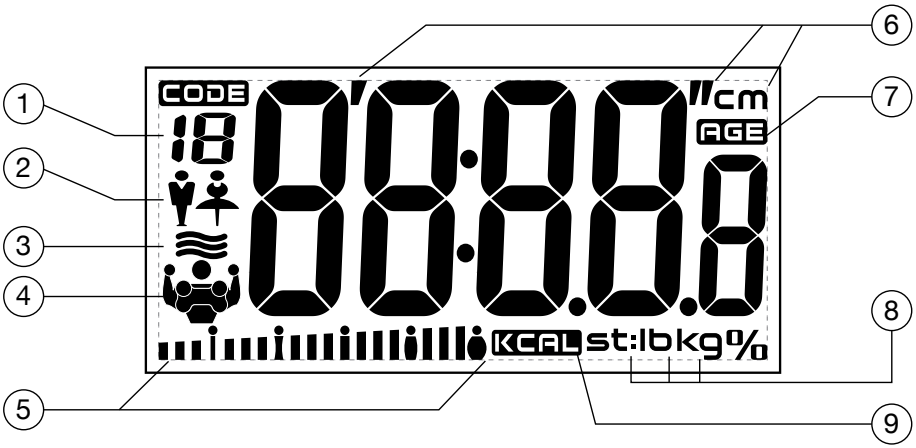


1. Kaydedilmiş Kullanıcı Numarası
2. Cinsiyet
3. Su Oranı
4. Yağ, Kas, Kemik Oranı
5. Yağlılık Durumu Göstergesi
6. Uzunluk Birimi
7. Yaş
8. Ağırlık Birimi
9. Kalori Birimi

Hercules Vücut Analiz baskülündeki ölçüm değerleri ve verilen yüzdelerin sıralamadaki isimleri aşağıdaki gibidir.


Ölçüm esnasında sırasıyla;

- Ürün ekranında ilk gösterge Kg değeridir.
- İkinci göstergede % Yağ oranı ve alt tarafta yağlılık durumu, üçüncü göstergede % Su oranı, dördüncü göstergede % Kas oranı, beşinci göstergede % Kemik oranı ve altıncı göstergede günlük kalori ihtiyacı (kcal) değeri gösterilmektedir.

Ağırlık Birimini Ayarlama

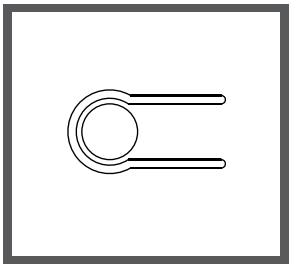

KG-Kilogram
LB-Pound
ST-Stone

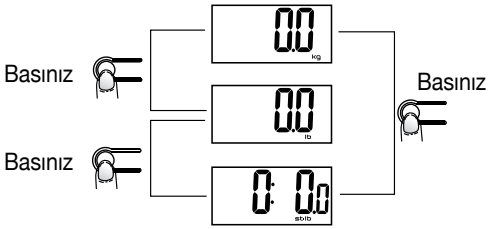

Cihazın arkasında birim değiştirici düğmesini bulabilirsiniz.


- Cihazın arkasında yer alan ağırlık birimi değiştirme tuşuyla KG-LB-ST ağırlık birimleri arasından istediğinizi seçebilirsiniz. Cihaz kapalı durumdayken düğmeye bir kez bastığınızda LCD ekranda o an kullanılan ağırlık birimini gösterecektir. Bir kez daha basarsanız ağırlık birimini değiştirebilirsiniz.
- Arzu edilen ağırlık birimi seçildikten sonra cihaz kendini 3 saniye sonra otomatik olarak kapatacaktır. Cihazı tekrar çalıştırdığınızda seçmiş olduğunuz ağırlık birimi aktif olacaktır.
- Ağırlık birimlerinden lb veya st seçilirse uzunluk birimi de otomatik olarak feet veya inch olacaktır.
- Ağrılık birimlerinde kg seçildiğinde uzunluk birimi otomatik olarak cm olacaktır.

NOT!

Ölçek birim sistemi satış noktasına veya distribütörün ihtiyacına göre değişmektedir.

Sadece Ağırlık Ölçümü

1. Otomatik Olarak Açılarak Ölçüm

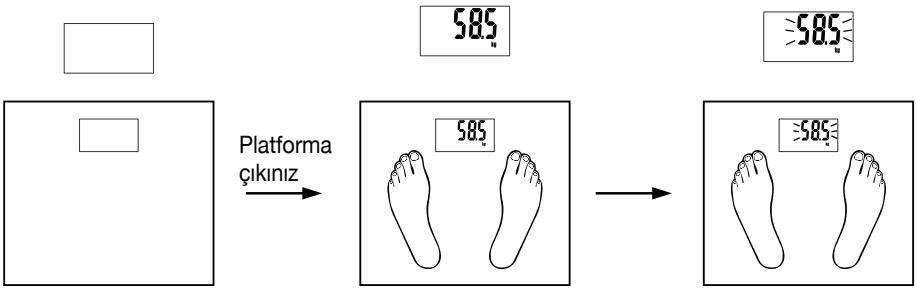

Cihaza pil takınız ve cihazı düz bir zemine yerleştiriniz.


Ağırlığınız ekranda belirecektir.

Rakamlar yanıp sönmeye başladığında kilonuz sabitlenmiştir.

2. Ağırlık Ekleyerek Ölçüm

Ağırlık değerinizin stabil olarak LCD ekranda gösterilmesinden sonra artı ağırlıklarla ölçüm yapabilirsiniz. Fakat yeni bir ölçüm yapılabilmesi için eklenen ağırlığın 2kg'dan fazla olması gerekmektedir.

Örnek: Bebeğinizin tartım değerini almak istiyorsanız, önce kendinizi tartabilir ve ardından bebeğinizi tartıdan inmeden bir arada tutabilirsiniz. Ardından toplam ağırlık okumasını elde edersiniz. Kendinizin önceki okumasını yeni okumadan çıkardığınızda, farkı bebeğinizin tartım değeri olarak elde edersiniz.

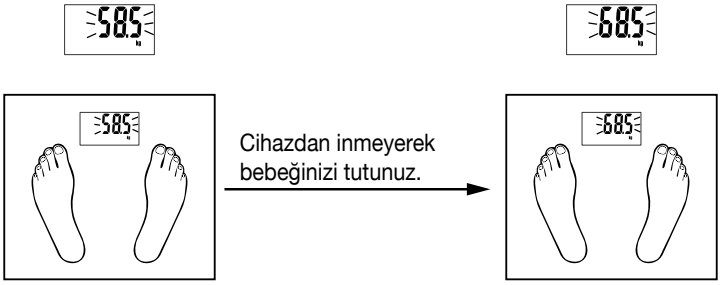

Rakamlar yanıp sönmeye başladığında kilonuz sabitlenmiştir.

Toplam ağırlığınız ekranda belirecektir.

Yağ, Su, Kas, Kemik, Kalori Ölçüm Modu

1. Kişisel Parametrelerin Girilmesi

Cihazın pilini ilk kez taktığınızda ve cihazı ilk kez çalıştırdığınızda varsayılan parametreler şu şekilde olacaktır;


Kullanıcı	Cinsiyet	Boy	Yaş
1	Erkek	165cm/5'05.0"	25

Parametreler aşağıdaki aralıklarda girilebilir:

Kullanıcı	Cinsiyet	Boy	Yaş
1-12	Erkek / Kadın	100-250cm 3'03.5"-8'02.5"	10-100

Parametrelerin Girişi

Örnek: 28 yaşında 168 cm boyunda üçüncü kullanıcı olarak kaydedilmiş kadın parametrelerini aşağıdaki gibi girecektir:

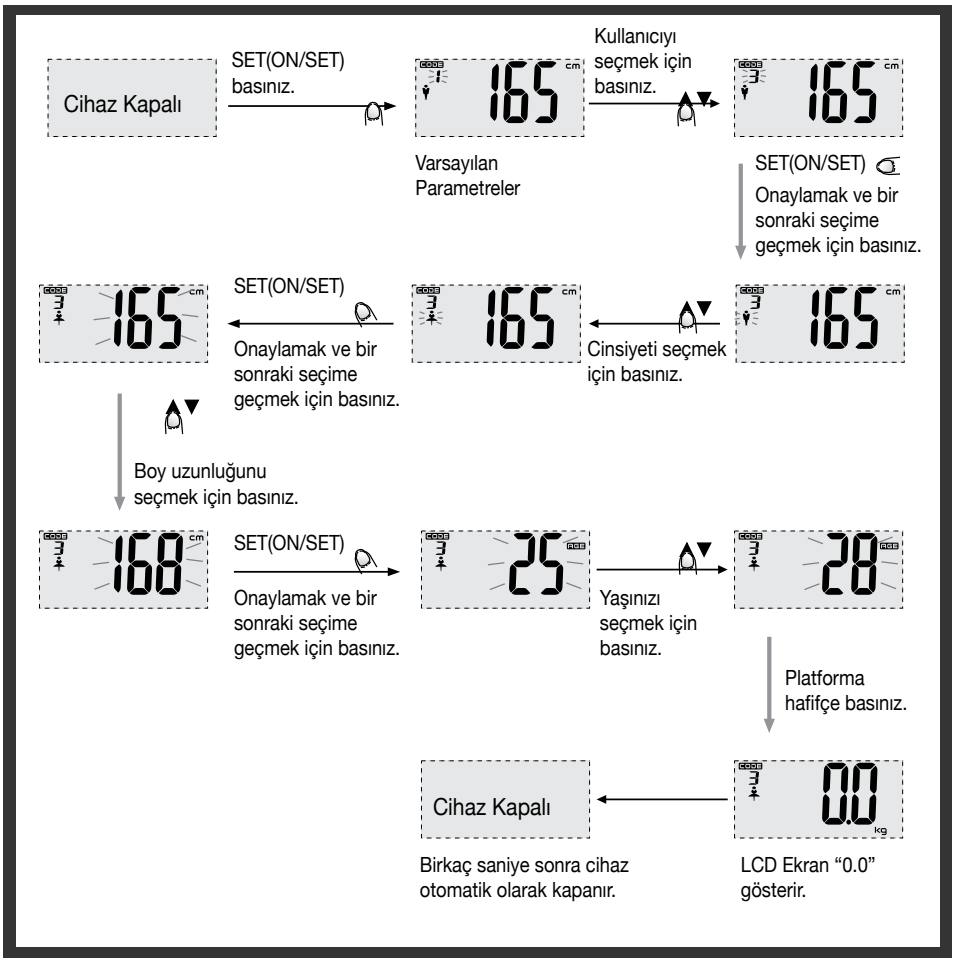

NOT!

Parametreler girilirken 6 saniye hiçbir şeye basmadan beklenirse, parametreler otomatik olarak kaydedilecektir ve LCD ekranda "0" gösterilecektir. Bu Vücut Yağ Analizinin başladığı anlamına gelir.


NOT!

Eğer parametre girişi sırasında LCD ekranda 0 görünüyorsa; 3 saniye boyunca SET düğmesine basılı tutunuz. Böylece parametre ekranına girebilir ve parametreleri tekrar girebilirsiniz.


2. Ölçüme Başlamak

- Ölçüm yapılırken ayaklarınızın metal elektrotlara değdiğinden emin olunuz. Aksi taktirde Vücut Yağ Analiziniz yapılamaz.
- Doğruluktan emin olmak için platforma çıkmadan önce ayakkabılarınızı ve çoraplarınızı çıkarınız.

Örnek: 28 yaşında 168cm boyundaki bayan kullanıcının 3. Kullanıcı olarak ölçümü aşağıdaki gibi olacaktır;

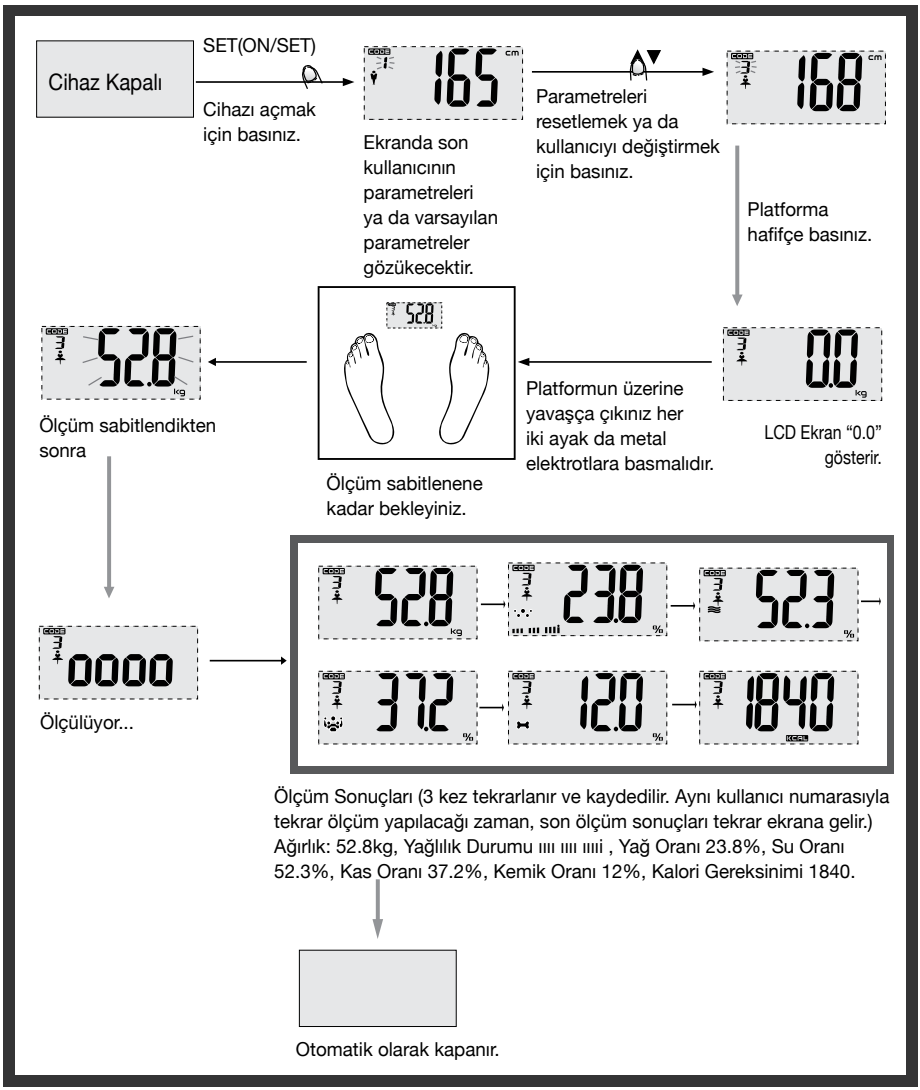


Uyarı Göstergeleri

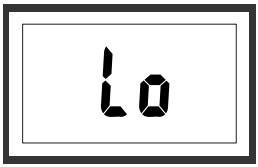

Lo : Pil az uyarısı.

Pilin gücü azalmış durumda. Lütfen pilini değiştiriniz.

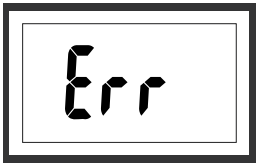


Err: Aşırı yükleme uyarısı.

Cihazın üzerindeki ağırlık cihazın max. ağırlığını aşmaktadır. Herhangi bir zarardan kaçınmak için cihazın üzerindeki ağırlık cihazdan indirilmelidir.




Errl: Düşük yağ oranı uyarısı.

Vücut yağ oranı çok düşük. Lütfen besleyici bir diet uygulayınız ve kendinize dikkat ediniz.

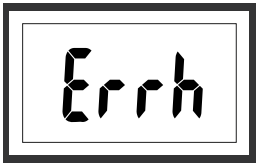

Errh: Yüksek yağ oranı uyarısı.

Vücut yağ oranı çok yüksek. Lütfen diyetinize dikkat ediniz ve daha fazla egzersiz yapınız.

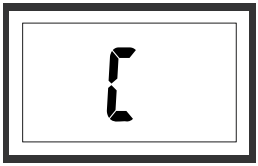

C: Tekrar ölçüm uyarısı.

Bir hata oluştu. Doğru ölçüm değerini elde etmek için lütfen tekrar ölçüm yapınız.

Vücut Yağ Oranı

1. Vücut yağ oranı hakkında

- Yağ oranı insan vücudundaki yağın yüzde olarak oranının indeksidir.
- Yağ oranın yüksek çıkması çeşitli hastalık risklerini beraberinde getirir.

2. Çalışma prensibi

Vücuda gönderilen güvenilir elektrik sinyalleri vücut yağında; vücuttaki kasa ve diğer insan dokularına göre daha iyi iletilir. Bu yüzden biyolojik analizde, vücuda düşük voltajda güvenli frekanslarda elektrik akımı yollanacaktır. Vücut yağ oranı bu elektrik sinyallerinin farklarından hesaplanmaktadır.

3. Yağ/Su içeriği uygunluk riski kartı

Ölçümünüzden sonra aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz.

Yaş	Yağ(F)	Su(F)	Yağ(M)	Su(M)	Durum	Durum Göstergesi
≤30	4.0-16.0%	66.0-57.8%	4.0-11.0%	66.0-61.2%	Çok Zayıf	ıiiii
	16.1-20.5%	57.7-54.7%	11.1-15.5%	61.1-58.1%	Zayıf	iiii iiiii
	20.6-25.0%	54.6-51.6%	15.6-20.0%	58.0-55.0%	Normal	iiii iiii iiiii
	25.1-30.5%	51.5-47.8%	20.1-24.5%	54.9-51.9%	Kilolu	iiii iiii iiii iiiii
	30.6-60.0%	47.7-27.5%	24.6-60.0%	51.8-27.5%	Çok Kilolu	iiii iiii iiii iiii iiiii
≥30	4.0-20.0%	66.0-55.0%	4.0-15.0%	66.0-58.4%	Çok Zayıf	iiiii
	20.1-25.0%	54.9-51.6%	15.1-19.5%	58.3-55.3%	Zayıf	iiii iiiii
	25.1-30.0%	51.5-48.1%	19.6-24.0%	55.2-52.3%	Normal	iiii iiii iiiii
	30.1-35.0%	48.0-44.7%	24.1-28.5%	52.2-49.2%	Kilolu	iiii iiii iiii iiiii
	35.1-60.0%	44.6-27.5%	28.6-60.0%	49.1-27.5%	Çok Kilolu	iiii iiii iiii iiii iiiii

Yukarıdaki bilgiler sadece referans amaçlıdır.

Kalori Hakkında

1. **Kalori-Enerji tüketimi**

   Kalori: Enerji Birimi

   Kalori ölçümü kullanıcının yaşına, cinsiyetine, kilosuna ve boy uzunluğuna göre günlük metabolizmanızın gerekli duyduğu enerji miktarını belirtir.

2. **Kalori-Kilo kaybı**

   Alınan kaloriyi kontrol etmek ve düzenli egzersiz yapmak kilo kaybetmenin efektif bir yoludur. Bu basit bir yöntemdir. Alınan günlük enerji, kullanılan enerji miktarını karşılamıyorsa, vücut bu enerji açığını vücuttaki yağ ve karbonhidratları yakarak kapatır. Bu da kilo vermenize neden olur.

Kullanım ve Bakım Önerileri

1. Platform ıslak ise kaygan olabilir. Bu yüzden platformu kuru tutunuz.
2. Ölçüm bitene kadar platformun üzerinde bekleyiniz.
3. Cihazı sarsmayınız, vurmayınız ve düşürmeyiniz. Cihaza zarar verebilirsiniz.
4. Cihazı kuru ve yumuşak bir bezle temizleyiniz. Cihazın içine su kaçmamasına özen gösteriniz. Kimyasal ve aşındırıcı temizleyici kullanmayınız.
5. Cihazı serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
6. Cihazınızı her zaman yatay pozisyonda muhafaza ediniz.
7. Eğer cihaz açılmıyorsa, pillerin takılı olduğundan, pil gücünün güçlü olduğundan emin olunuz. Pilleri değiştiriniz veya yeni pil takınız.
8. Eğer cihazınızın ekranında bir problem varsa veya cihaz uzun zaman açık kalıp kapanmıyorsa pillerini çıkarıp 3 saniye bekleyiniz ve tekrar takınız. Eğer sorun hala çözülmüyorsa en yakın Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.

Cihazın Saklanması

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız serin ve kuru bir yerde saklayınız.
- Cihaz fişinin çekildiğinden ve parçalarının tamamen kuru olduğundan emin olunuz.
- Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.

Geri Dönüşüm

Cihazınızın kullanım ömrü sona erdiğinde aşağıdaki adımları izleyerek doğru şekilde geri dönüşüm sağlayınız:

- Cihazın kablosunu keserek kullanılamaz hale getiriniz.
- Cihazı, ülkenizdeki geçerli yasalara göre bu tür cihazlar için özel olarak tanımlanan atık kutularına bırakınız.

- Elektrikli atıklar evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemelidir.
- Cihazı, elektrikli atıklar için belirlenen çöp kutularına atınız.
- Cihazın ambalajı geri dönüşüm özellikli malzemelerden oluşur.
- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm kutularına atınız.
- Cihaz, WEEE (AEEE Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar) Yönetmeliğine uygundur.



NOT!

- Müşteri hizmetlerini aramadan önce sorunu/arızayı kendiniz düzeltip düzeltemeyeceğinizi kontrol ediniz. Bunun için lütfen "**Sorun Giderme**" bölümüne bakınız. Sorunu/arızayı çözemiyorsanız, müşteri hizmetlerini arayınız.
- Aramadan önce lütfen **model adını** ve ürün **seri numarasını** yanınızda hazır bulundurunuz. Bu bilgileri ürününüzün **Tip Etiketi** üzerinde bulabilirsiniz.

  Yardım Hattı: (+90 212) 444 0 241

Sorun Giderme

Cihazınız, herhangi bir arızaya karşı kalite kontrolden geçirilmiştir. Ancak, herhangi bir nedenden dolayı çalışmazsa, **Fakir Yetkili Servisi'ne** başvurmadan önce uyarı göstergelerini kontrol ediniz

Gönderim

Cihaza herhangi bir zarar gelmesini önlemek için aşağıdaki adımları izleyerek cihazınızı güvenli bir şekilde taşıyınız:

- Cihazı orijinal ambalajında taşıyınız.
- Orijinal ambalaj mevcut değilse, benzer bir takviye malzemeli ambalaj kullanınız.

NOT / NOTES

English

Usage Instructions 20
Meaning of Symbols 20
Responsibility 20
CE Declaration of Conformity 20
Intended Use 20
Unauthorized Use 21
Safety Warnings 21
Product-Specific Safety Warnings 22
Opening the Box 23
Features/Specifications 24
Performance Index 24
To Install or Replace Battery 24
Key Illustration 25
LCD Display 25
To Set Weight Unit 26
Optional Normal Weighing Mode (bypassing parameter setting) 26
Fat/Hydration/Muscle/Bone/Calorie Measuring Mode 27
Parameter Setting 28
Warning Indications 30
About Fat 31
About Calorie 32
Advise for use & care 32
Device Storage 32
Recycling 32
Troubleshooting 33
Shipping 33

Dear Customer,

We hope you enjoy using your product. Thank you for choosing **Fakir Hausgeräte**, a leader in innovative technologies. Please read this user manual carefully before using the product and keep it for future reference.

Usage Instructions

These usage instructions are prepared to ensure that the device is used properly and safely. For your safety and the safety of others, please read the user manual before operating the device.

Meaning of Symbols

In this user manual, you will see the following symbols:

WARNING!

This symbol indicates hazards that could lead to injury or death.

CAUTION!

This symbol indicates hazards that could cause damage to your product or malfunction.

NOTE!

Indicates important and useful information in the user manual.

Responsibility

Fakir Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. accepts no responsibility for any damage or repairs made outside Fakir Authorized Service Centers or for improper use of the device resulting from non-compliance with the instructions in this user manual.

CE Declaration of Conformity

This device complies fully with the European Union's 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility and 2014/35/EU Low Voltage Directives. The product bears the CE mark on the device type label.

Intended Use

The product model is designed for home use. It is not suitable for workplace or industrial use. Any malfunction resulting from such use will not be covered by our authorized service.

Unauthorized Use

In the following cases of unauthorized use, the device may be damaged or cause injuries:

- **Restricted Capabilities and Supervision:** This device should not be used by persons (including children) with limited physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or given instructions regarding the safe use of the device. Children should be supervised to ensure they do not play with the device.
- **Use with Limited Abilities:** The device can be used by children aged 8 years and above and persons with limited physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge only if they are supervised, given instructions on safe use, and understand the potential hazards.
- **Packaging Materials:** Keep materials like bags included in the package away from children. There is a risk of suffocation!
- **Cleaning and Maintenance:** Children under 8 years should not clean or maintain the device unless they are supervised.
- **Device and Cable Safety:** Keep the device and its cable out of the reach of children under 8 years old. Children should be supervised to ensure they do not play with the device. Electrical devices are not toys for children. Therefore, use and store the device out of the reach of children. Children may not be aware of the dangers associated with the use of an electrical device. Ensure the power cord does not hang down from the device.

Safety Warnings

When using an electrical device, always follow the precautions below to prevent fire, electric shock, and personal injury:

- **Read the User Manual:** Carefully read the information in the user manual and keep it for future reference. If you give the device to a third party, be sure to include the manual.
- **First Use:** When you remove the product from its packaging, make sure all accessories and attachments are complete. If any parts are missing,

contact your nearest Fakir Authorized Service Center. Keep the protective bags of the accessories and attachments away from children and infants to prevent the risk of suffocation.

- **Check the Condition of the Device:** If you suspect that there is any issue with the device, its casing, cable, or plug, do not operate the device and contact the nearest Fakir Authorized Service Center.
- **Cable and Plug Safety:** Do not use the device if the power cord or plug is faulty or damaged. Do not use the device with an extension cord and ensure that the power cord does not come into contact with heat sources or sharp edges. When unplugging, always pull the plug itself, not the cord. Do not pull on the cord or lift the device by the cord.
- **Child Safety:** Never leave the machine unattended while it is plugged in. Do not allow children to play with the device unsupervised. Store the device's power cord out of the reach of children. Electrical devices are not toys for children.
- **Use of the Device:** Do not use the device outdoors. Your machine may be adversely affected by dirt or rain. Do not immerse the machine in water and protect it from rain or moisture. The device operates with electrical power, which poses an electric shock hazard. Therefore, do not touch the plug with wet hands. Do not use the device to clean flammable or explosive materials (e.g., gasoline or alcohol), burning or smoldering objects (e.g., cigarettes, matches, or hot ashes).
- **Maintenance and Cleaning:** Before cleaning and maintenance, unplug the device and allow it to cool down.
- **Usage Restrictions:** Use the electrical device only as intended. Using the device contrary to the instructions may shorten its lifespan and pose safety risks.

Product-Specific Safety Warnings

User-friendly Tips

1. During Measuring

A. The device is designed to allow auto step on. Please always ignore the first reading and only start taking effective record from the second time weighing.

B. Always remove your shoes and socks , wipe clean your feet before using.

C. Step on the weighing platform gently.
D. It is advisable to take measurement at the same time of the day.
E. Measured result could be misleading after intensive exercise, excessive dieting or under extreme dehydration condition.
F. Always weigh/use the scale on a hard and flat surface. When you are measuring, please keep still.
G. The measured data of the following people may have deviation:
- Children under 10 or adult over 100 (can only use the device under normal weighing mode)
- Adult over 70 Body building athletes or other occupational athletes.

H. People with the following conditions should not use the device:
- Pregnant women
- Those with symptom of edema
- Those on dialysis treatment
- Those who use heart pacemaker or with other implanted medical device.

2. Safety Warning

A. The Fat% Hydration% content evaluated by the Fat Monitor Scale is only for reference (not for medical purpose). If your Fat% Hydration% content is over/below normal level, please consult your doctor for more advice.

B. Keep away from strong electro-magnetic field when using the scale.

C. It could be slippery if you weigh on a wet surface. Moreover, if the weighing platform surface is glazed, never step on the edge of the scale and do keep balance during your weighing.



Carefully read the safety rules and usage instructions in this user manual.

Keep this user manual for future reference.

Opening the Box

- Before first use, remove the device and accessories from the box and check for damage or defects. If the device is damaged or defective, do not use it and contact **Fakir Authorized Service**.
- Repairs should only be performed by Fakir Authorized Service Centers.
- Repairs by unauthorized persons may be harmful to the user.

⚠ WARNING!

Do not use a faulty or defective product.

Features/Specifications

1. Using high precision strain gauge sensor.
2. Multifunction: test body fat %, body hydration %,body muscle%, body bone% and suggest calorie intake requirement.
3. Built-in memory for 12 different users.
4. Optional normal weighing mode (bypassing parameter setting): Auto step on weighing and consecutive add-on weightings.
5. Low battery and overload indication.

NOTE!


The values indicated on the device or in other printed documents provided with the product are obtained under laboratory conditions according to relevant standards. These values may change depending on the product's use and environmental conditions.

Performance Index

Index / Item	Weighing Capacity	Fat%	Hydration%	Muscle%	Bone%	Calorie
Index Range		4.0% ~60.0%	27.5% ~66.0%	20.0% ~56.0%	2.0% ~20.0%	
Division	0.1kg 0.2lb	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	1KCAL

To Install or Replace Battery

- Remove isolation sheet before use.
- Open the battery case cover at the bottom of scale.
- Press battery gently, the battery will pop up automatically.
- Install new battery by connecting one side of battery to the positive plate first, and then pressing down the other side. Please observe the polarity.

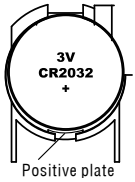


Key Illustration

SET (ON/SET) : Turn on the scale and prompt to next parameter. (Please refer to the Setting Personal Parameter overleaf)

▲: Advance the value by one interval each press. Continuous pressing will speed up the advance of value.

▼:Decrease the value by one interval each press. Continuous pressing will speed up the decrease of value.

LCD Display

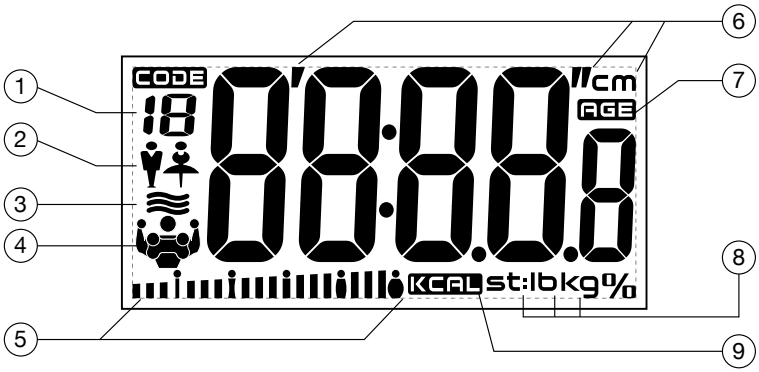


1. User memory code
2. Gender
3. Hydration%
4. Fat%/Muscle%Bone%
5. Fat status indication
6. Height Unit
7. Age
8. Weight Unit
9. Calorie Unit

Here is the measurement assets and the sorting the names of the measurement percentages.


While the measurement;

- First measurement is the weight (Kg).
- Second measurement is %Fat ratio and status of the fatness in below. Third measurement is % Water ratio. Fourth measurement is % Muscle ratio, fifth measurement is % Bone ratio and the sixth measurement is daily recommended calorie (kcal).

To Set Weight Unit

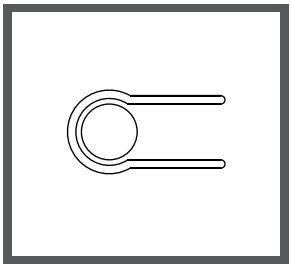

KG-Kilogram
LB-Pound
ST-Stone

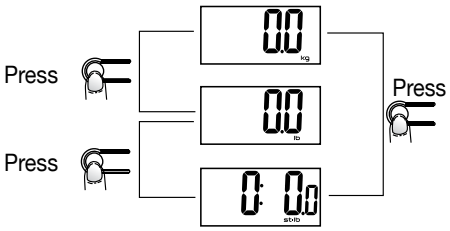

At the bottom of scale,you can find a unit conversion button as shown in picture.


- If your scale is available (or applicable) in kg/lb/st, you can set to the one you prefer by pressing the unit conversion button. Press the unit conversion button when scale is power off, LCD shows current weight unit. Press the button again to convert weight unit.
- After selecting the prefered unit, the scale will be auto-off after 3 seconds. Selected weight unit will be activated when the scale is turned on again.
- When setting lb/st as weight unit, the default height unit is feet/inch.
- When setting kg as weight unit, the default height unit is cm.

NOTE!

The unit system of scale depends on sales destination or the requirement of distributor.

Optional Normal Weighing Mode (bypassing parameter setting)

1. Auto Step On Weighing

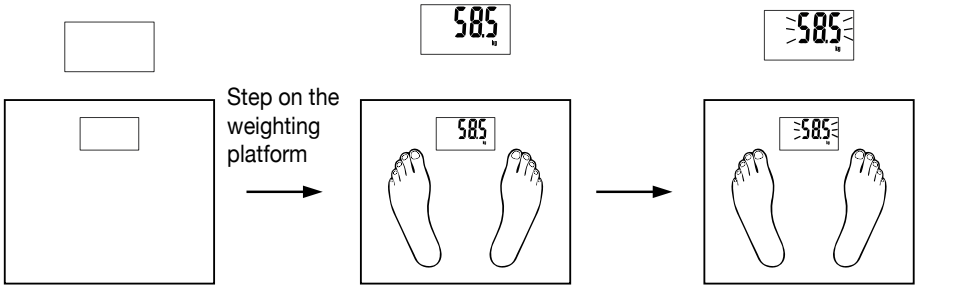

Install battery (please refer to Page 2), and place the scale on flat floor.


Display your weight.

Digits flash, stabilized and locked.

2. Start Measurement

After your weight value is stably displayed on the LCD screen, you can perform measurements with additional weights. However, for a new measurement, the added weight must be more than 2 kg.

Example: If you want to obtain your baby's weight, you can first weigh yourself, and then, without stepping off the scale, hold your baby in your arms. Then you will get the total weight reading. By subtracting your previous reading from the new one, you obtain your baby's weight as the difference.

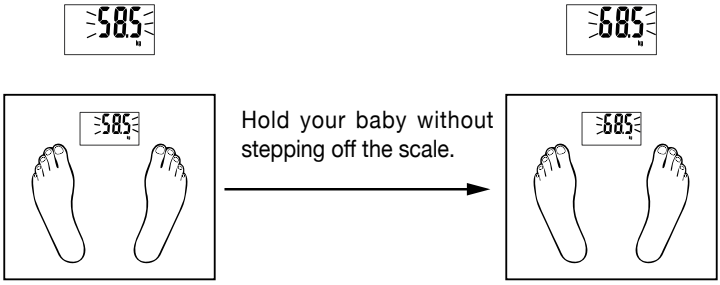

Digits flash, stabilized and locked. Display total weight.

Fat/Hydration/Muscle/Bone/Calorie Measuring Mode

1. Setting personal parameters

At the first time when you install battery and switch on, all default parameter are set as follow:


Memory	Gender	Height	Age
1	Male	165cm/5'05.0"	25

Parameters can be set in the following range:

Memory	Gender	Height	Age
1-12	Male/Female	100-250cm 3'03.5"-8'02.5"	10-100

Parameter Setting

Example: The 3rd user, female, 168cm, 28 years old, can set her parameters as follow:

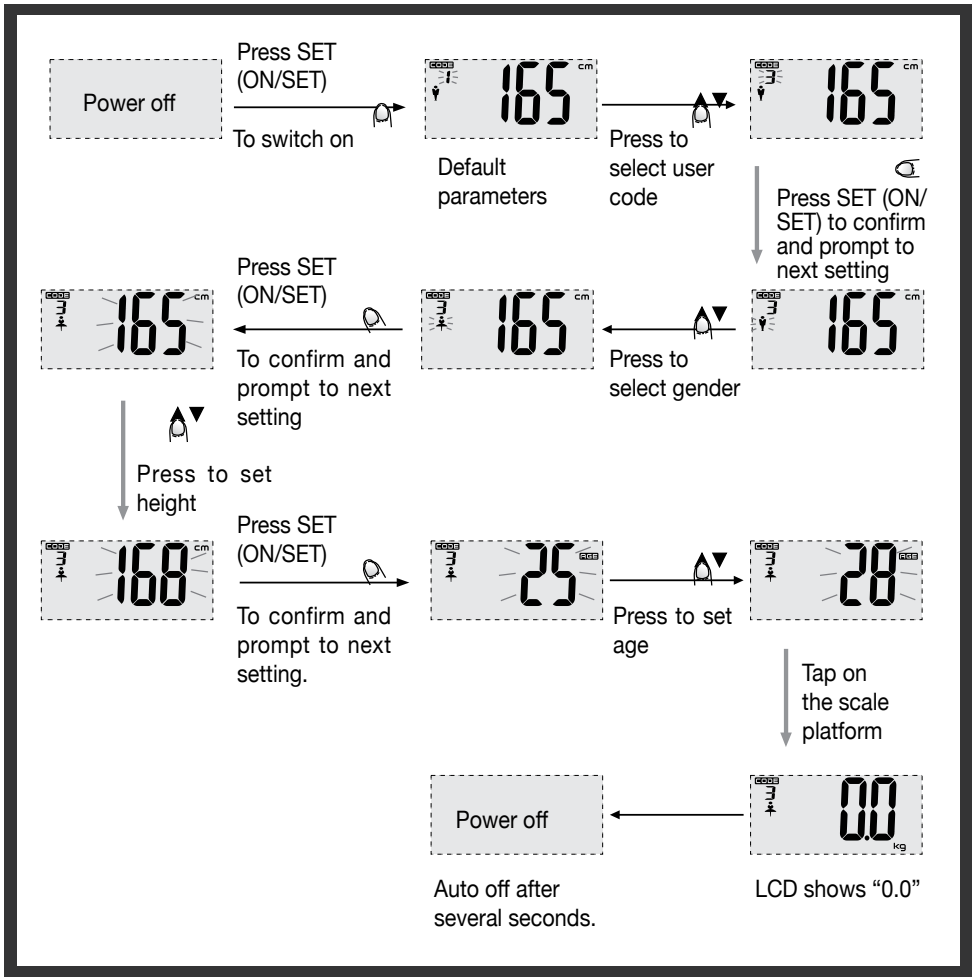

NOTE!

During parameter setting, if idle for 6 seconds, the parameters already set will be memorized automatically and LCD shows “0”, meaning body fat measuring will be started.


NOTE!

If LCD prompt to show “0” during parameter setting, press SET(ON/SET) for 3 seconds to return setting mode, then you can set user code,gender, height and age.


2. To Start Measuring

- Make sure your feet are touching with metal electrodes on the scale platform, or body fat can not be measured.
- To ensure accuracy, please remove your shoes & socks before stepping on.

Example: The 3rd user, female, 168cm, 28 years old can measure as follow.

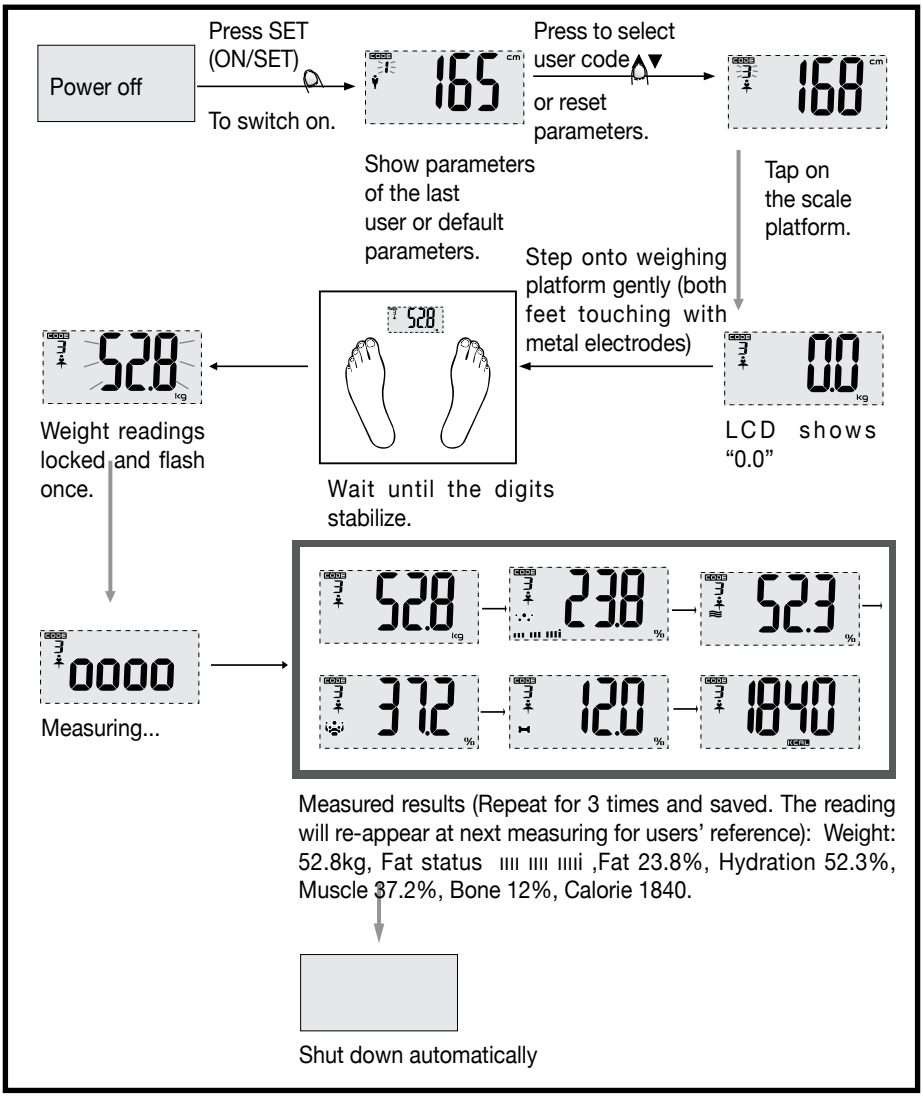


Warning Indications

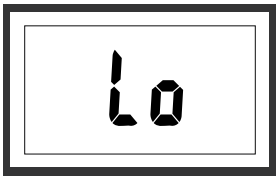

Low Battery Indication

The battery power is running low, please replace with a new battery.

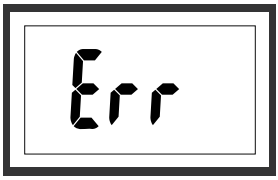


Over-load Indication

The weighing subject on the platform exceeds the maximum capability of scale. Please step off to avoid damage.




Low Fat% Indication

The Fat% is too low. Please lead a more nutritional diet and take good care of yourself.

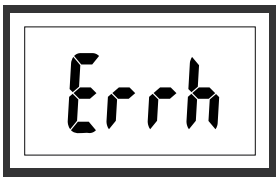

High Fat% Indication

The Fat% is too high. Please watch your diet and do more exercise.

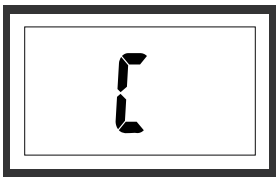

Re-test

Error exists, please re-test to get the correct result.

About Fat

1. About Fat%

- Fat% is an index % of fat content in human body.
- The fat content in human body is of a certain level, overabundance of fat will bring bad effects on metabolism, thereby, various illnesses may invade. Here goes an old saying, “Obesity is hotbed of illness”.

2. Working Principles

As electrical signal of certain frequency transmits through human body, the impedance of fat is stronger than that of muscle or other human tissues. Through the use of biological resistance analysis, this product will pass a safe frequency of low voltage electrical current through human body, thus, the Fat% will be reflected according to the resistance differences when the electrical signal transmitting through human body.

3. Fat/Hydration Content Fitness Assessment Chart

After your weighing, you can use the following Assessment Chart for reference:

Age	Fat(F)	Hydration(F)	Fat(M)	Hydration(M)	Status	Key Line Indication
≤30	4.0-16.0%	66.0-57.8%	4.0-11.0%	66.0-61.2%	Too Lean	ıiiii
	16.1-20.5%	57.7-54.7%	11.1-15.5%	61.1-58.1%	Lean	iii iiii
	20.6-25.0%	54.6-51.6%	15.6-20.0%	58.0-55.0%	Normal	iii iii iiii
	25.1-30.5%	51.5-47.8%	20.1-24.5%	54.9-51.9%	Fat	iii iii iii iiii
	30.6-60.0%	47.7-27.5%	24.6-60.0%	51.8-27.5%	Too Fat	iii iii iii iii iiii
≥30	4.0-20.0%	66.0-55.0%	4.0-15.0%	66.0-58.4%	Too Lean	ıiiii
	20.1-25.0%	54.9-51.6%	15.1-19.5%	58.3-55.3%	Lean	iii iiii
	25.1-30.0%	51.5-48.1%	19.6-24.0%	55.2-52.3%	Normal	iii iii iiii
	30.1-35.0%	48.0-44.7%	24.1-28.5%	52.2-49.2%	Fat	iii iii iii iiii
	35.1-60.0%	44.6-27.5%	28.6-60.0%	49.1-27.5%	Too Fat	iii iii iii iii iiii

The above information is only for reference

About Calorie

1. **Calorie & Energy Consumption**
   Calorie: Energy Unit
   The data reading indicates the energy you need to sustain the daily metabolism and ordinary activities required for your weight, height, age and sex.
2. **Calorie & Losing Weight**
   Control the calorie intake combined with proper exercise is an effective way to lose weight. This is a very simple theory. As the daily energy intake can not support the energy consumption of the human body, the saccharide and fat stored inside will decompose and provide energy to human body. That leads to weight loss.

Advise for use & care

- The platform will be slippery when it is wet. Keep it dry!
- Keep standing still during the course of weighing.
- DO NOT strike, shock or drop the scale.
- Clean the scale with a damp cloth and avoid water getting inside the scale. DO NOT use chemical/ abrasive cleaning agents.
- Keep the scale in cool place with dry air.
- Always keep your scale in horizontal position.
- If failed to turn on the scale, check whether battery is installed, or battery power is low. Insert or replace new battery.
- If there is error on display or can not turn off the scale for a long time, please take off the battery for about 3 seconds, then install it again to re move soft-fault. If you can not resolve the problem, please contact your dealer for consultation.

Device Storage

- If you do not plan to use the appliance for a long while, store it in a cool and dry place.
- Ensure that the appliance is unplugged and its parts are completely dry.
- Ensure that the appliance is kept out of reach of children.

Recycling

When your product reaches the end of its life, follow these steps for proper recycling:

- Cut the device's cable to make it unusable.
- Dispose of the device in designated waste bins for such devices according to the applicable laws in your country.



- Electrical waste should not be disposed of with household waste.
- Throw the device into bins designated for electrical waste.
- The device's packaging is made from recyclable materials.
- Dispose of packaging materials in appropriate recycling bins.
- The device complies with the 2
- The device complies with the WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive.



NOTE!

- Check if you can fix the problem or defect yourself before calling customer service. For this, please refer to the "**Troubleshooting**" section. If you cannot resolve the issue or defect, call customer service.
- Before calling, please have the **model name** and product **serial number** ready. You can find this information on the **product's type label**.

  Help Hotline: (+90 212) 444 0 241

Troubleshooting

Your appliance has undergone quality control to prevent any malfunctions. However, if it does not operate for any reason, please check the warning indicators before contacting an authorized **Fakir Service Center.**

Shipping

To prevent damage to the device, follow these steps to transport your device safely:

- Transport the device in its original packaging.
- If the original packaging is not available, use a suitable and soft packaging that protects the device.

Fakir
HAUSGERÄTE

Üretici/İthalatçı - Manufacturer / Importer:
Fakir Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Saruhan Plaza, Basın Ekspres Yolu, No:39 K.Çekmece / İstanbul, TÜRKİYE
Tel: +90 212 249 70 69
Faks: +90 212 293 39 11
Yetkili Servislerimize www.fakir.com.tr'den ulaşabilirsiniz
Müşteri Hizmetleri: 444 0 241
www.fakir.com.tr

Fakir Hausgeräte GmbH
Industriestraße 6 D-71665 Vaihingen / Enz
Postfach 1480 D-71657 Vaihingen / Enz
Tel.: +49 7042 / 912-0
Fax: +49 7042 / 912-360
www.fakir.de

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
2. Satıcı ve üretici/ithalatçı tarafından malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri yazılarak kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
3. Kullanıcının malı tanıtma ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlardan kaynaklanan hasar ve arızalar (çizilme, kırılma, kopma, vb.) garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenir ve bu raporun bir nüshası tüketiciye verilir. Tüketiciler, rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir. Belirtilen haller dışında, bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresi boyunca firmamızın garantisi altındadır.
4. Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan, kireçlenen, kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, garanti kapsamı dışındadır. Bu parçalar yetkili servislerden ücreti mukabilinde satın alınabilecektir. Yetkili servislerden satın alınmayan parçalar nedeni ile oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
5. Ürüne ilişkin; ürün tanıtımı, montaj işlemleri, teknik kontroller vs. işlemler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yetkili servis dışındaki şahısların müdahalesi durumunda, malın tamamı garanti kapsamı dışındadır.
6. Voltaj düşmesi veya yükselmesinden dolayı veya hatalı elektrik tesisatı nedeniyle meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici, arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapabilir. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükü tüketiciye aittir.
8. Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis edecektir. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçı bu yükümlülükten kurtulur.
9. İş günü; ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleridir.
10. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
11. Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu madde kapsamı dışındadır.
12. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, aşağıda sınırlı sayıda sayılan seçimlik haklardan birini kullanabilir:
    a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
    b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
    c. Aşırı bir masraf gerektirmediği taktirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
    d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
13. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
    a. Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla tekrar arızalanması,
    b. Tamiri için 29029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nde belirtilen gereken azami sürenin aşılması,
    c. Tamirin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
14. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranın bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
15. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
16. Satılan mala ilişkin düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.
17. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
18. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine yapabilirler.

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : Fakir Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

MERKEZ ADRESİ : Saruhan Plaza, Basın Ekspres Yolu, No:39 Küçükçekmece, İstanbul / TÜRKİYE

TELEFONU : 0 212 249 70 69

FAKSI : 0 212 251 51 42

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI - KAŞESİ :

ÜRÜNÜN

CİNSİ : Cam Vücut Analiz Baskülü

MARKASI : Fakir

MODELİ : Hercules

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 (YİRMİ) İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :

ADRESİ :

TELEFONU :

FAKSI :

FATURA TARİH VE NO :

TARİH - KAŞE - İMZA :

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Farklı dillerde kullanım kılavuzu için QR kodu okutunuz.

Scan the QR code for the user manual in different languages.

Kullanım kılavuzuna **destek.fakir.com.tr** adresinden de ulaşabilirsiniz.

egaranti kayıt için QR kodu okutun.

egaranti kayıt için **fakir.egaranti.com** adresinden de ulaşabilirsiniz.